

視力(英字)記入見本

受診日


受付No. 501

健康診断科 内科 先生 佐藤

年齢 20 性別 男

記入する際の注意点

- ①黒のボールペンで記入をする
- ②✓が口枠からはみださないようにする

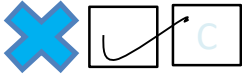

- ③記入箇所を間違えた場合は修正テープは使わず、二重線を引いて正しい箇所に✓を入れる
- ④口枠の中に薄くABCDの表記があるが、表記をなぞらずに右記例のように☑を入れること
- ⑤確認印枠には印鑑またはサイン(イニシャル可)をすること

裸眼	右	A	<input checked="" type="checkbox"/>	C	D	確認 <input checked="" type="checkbox"/>	
	左	A	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>	眼鏡忘れ <input checked="" type="checkbox"/>	
視力	該当箇所に☑を記入	区分	A:1.0以上 B:0.7~0.9 C:0.3~0.6 D:0.2以下				確認印 <input checked="" type="checkbox"/>
矯正	右	A	B	C	D	印鑑 <input checked="" type="checkbox"/>	
	左	A	B	C	D		

胸部 8888

心電図 8888

運動器

色覚 無 有

貧血

 左にある口の中に下記1~4のいずれかの判定を数字でご記入ください。

左目の中に☑をお願いします。

受診(要再検・精検) 4:治療継続

聴音 10:不整脈 679:甲状腺疾患

検査後に第三者が受診票チェックをする為、この検査に誤りがない、本人に数値を確認しているという意味で「確認」の口に✓をつける

「確認」に✓をつける場合はどんな時？

- ◎左右の区分が極端に違う(ガチャ目)場合
 (例)右A 左C
 右D 左Bなど
- ◎裸眼で左右の視力が片方でも区分が C (0.3~0.6) 以下の場合
 →眼鏡やコンタクトを持ってはいるが、検査時に忘れた場合は眼鏡忘れの口に✓を入れる
- ◎片目だけコンタクトを入れている場合
 →その場合裸眼と矯正両方の口に✓をつけ、記入箇所も間違えないように注意
- ◎失明、義眼、ケガ等の理由で片目だけ検査をした場合
 →検査しなかった方を視力検査欄の余白に「右目のみ」、「左目のみ検査」のように書いておく。また検査しなかった生徒の受付No(上記例だと用紙右上の501)を別途控え、後に責任者に報告する。

学校 視力検査(英字記入) 検査手順と注意点

検査をする前に...

- ①電源スイッチを入れてランプが付くかどうか、中を覗いて画面が見えるか必ず確認
- ②視力計の横にあるnear farレバーがfarになっているかどうか確認
- ③視力計の横にある黒の回転レバーを1(右目用の画面)にしておく

①生徒が来たら裸眼か矯正のチェック

①の注意点

★生徒が裸眼だった場合★

近視用(遠くを見る用)のメガネまたはコンタクトを普段使用しているか尋ねる

→「なし」の場合は裸眼の口枠に✓をつけ、右目から検査

→「あり」で手元にメガネがある場合はメガネをかけてもらい矯正の口枠に✓をつける

※メガネは持ってはいるが、教室に忘れた、家に忘れた等の場合はメガネ忘れと裸眼の口枠に✓をつける

★生徒がメガネをかけていた場合★

使用しているメガネが近視用(遠くを見る用)かを確認する

遠近両用のメガネの場合は遠くを見るようにして覗くよう声をかける

②生徒に額あてにおでこを付け、両目で覗くよう伝える

※見えにくい場合はまばたきを数回するように伝える

③右目から検査開始(数字の上にある○の切れ目を上下左右で答える)

③の注意点

★必ず0.7(7番)から検査開始★

それ以降は下記検査手順通りに実施する

④右目が終わったら視力計の横のレバーを2(左目用の画面)に切り替えて

左目も③同様の手順で検査をする

⑤結果を確認してもらい、次検査へ誘導、同時にレバーを1(右目用の画面)へ戻す

⑤の注意点

結果を確認してもらう際に結果は声に出さずに受診票を見せる。また検査中に間違えても「違う」「見えていない」という言い方はしないように!

間違えても「見えにくい」「見えづらい」という柔らかい伝え方をする。

その他の注意点

◎マスクをした生徒がいた場合、そのまま覗くと画面が曇って見えなくなる場合があるので、下にずらしてもらおうよう声をかける。

◎0.1(1番)が見えない場合は0.1で数値記入する。

◎中には失明、義眼装着等の生徒も稀にあり、自己申告がない場合が考えられる。

0.1(1番)が見えず、かつ光が見えないと失明している可能性があるため本人や周囲に配慮し、確認する。失明、義眼装着だった場合はその眼は検査せず、確認口枠に✓をつけ、検査しないほうの検査欄余白に「右目のみ、左目のみ検査」のように記入しておく。また、検査をしなかった人が誰か分かるように、受診票の上部にある受付Noを別途メモし、後に責任者に報告する。

◎視力計の額あてを拭くためのアルコール綿(アルコール綿)は使用後は一般ごみの袋(黄色い袋)には入れず、別にまとめておく。

